

Navod k obsluze

Specifikace

Nazev produktu: Infra cerveny teplomer

Rozsah pouziti: Vhodny k mereni teploty lidskeho cela metodou detekce infra cerveneho zarení.

Datum vyroby: Viz stitek na pristroji.

Bezpecnostni klasifikace: Zarizeni nesmi byt pouzivano v prostredi s horlavymi plyny nebo zneclistenym vzduchem.

Vzdalenost mereni: 2–5 cm

Jednotka teploty: C / F

Tolerance: $\pm 0,1$ C

Rozsah mereni: 32 C – 42,9 C

Tolerance mereni: $\pm 0,2$ C

Doba mereni: vice nez 1 sekunda

Typ displeje: LCD

Automaticke vypnuti pri necinnosti


Napajeni: DC 3V (2x baterie AAA)

Hmotnost: 105 g

Schema teplomeru

1. Displej
2. Nastaveni
 1. Kratce stisknete pro prepnutí mezi merením povrchové teploty a tělesné teploty.
 2. Dlouze stisknete pro vstup do menu.
3. Tlačítko +: stisknete pro přechod do paměti, 30 záznamů
4. Tlačítko -: stisknete pro přechod do paměti, 30 záznamů
5. Laserový senzor: vysoce přesný senzor
6. Reprodukční: upozorňuje na zvýšenou tělesnou teplotu
7. Tlačítko měření teploty
8. Rukojeť
9. Kryt baterií: 2x 1,5 V (AAA)

Navod k obsluze

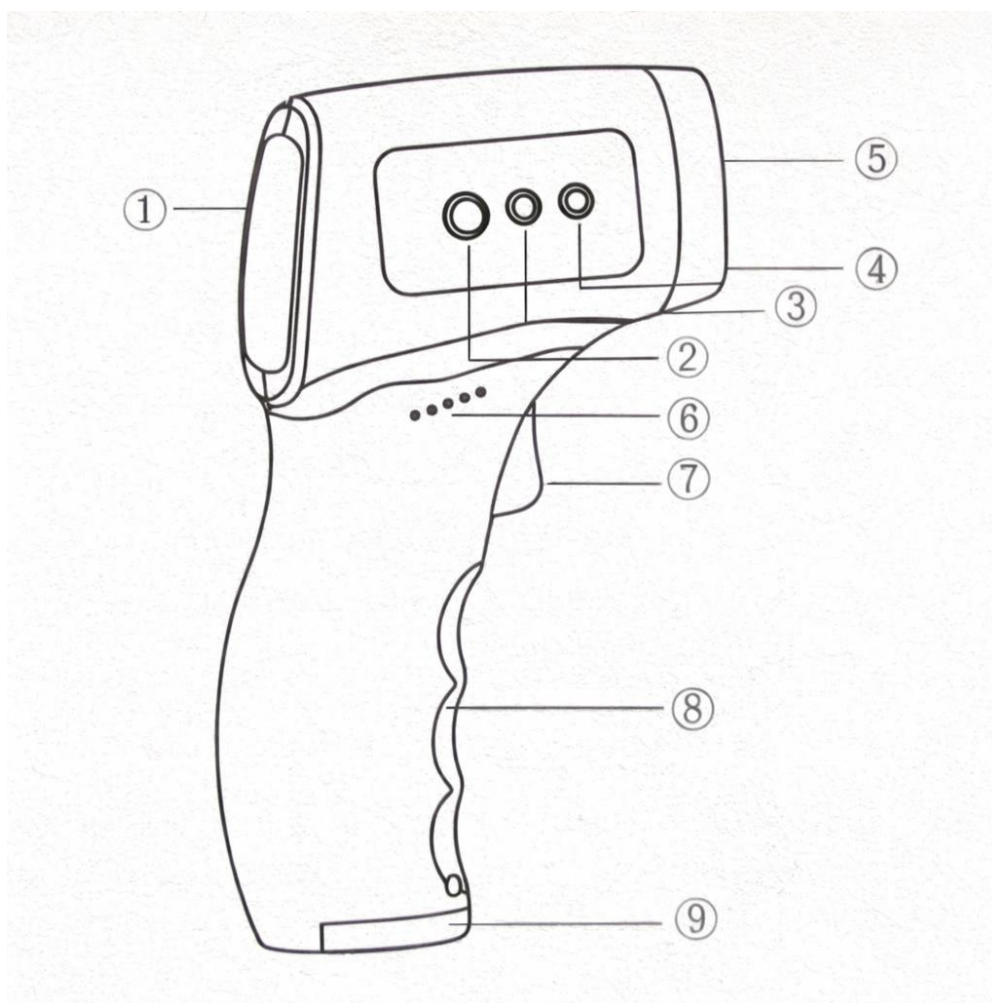

Nastavení tlačítek

Stisknete tlačítko měření (7) pro zapnutí přístroje, pokud je vypnutý. Zařízení provede autotest.

Po dokončení autotestu se zobrazí hodnota a zazní zvukový signál.

Pokud autotest selže, zařízení zobrazí chybu autotestu.

Dlouhé stisknutí tlačítka SET vyvolá menu:

F1 – Nastavení jednotky teploty: šipka dolů C, šipka nahoru F, vyjde C

F2 – Nastavení alarmu zvýšené teploty: šipka dolů -0,1 C, šipka nahoru +0,1 C, vyjde 38 C

F3 – Tolerance teploty: šipka dolů -0,1 C, šipka nahoru +0,1 C, vyjde 0,0 C

F4 – Nastavení zvuku: šipka dolů zvuk zapnutý, šipka nahoru zvuk vypnutý, vyjde zapnutý

Navod k obsluze

Popis obsahu obrazovky

Povrchova teplota

Telesna teplota

Namerena teplota


C / F

Upozorneni na slabou baterii

Ulozena teplota

Cislo zaznamu

Reproduktor

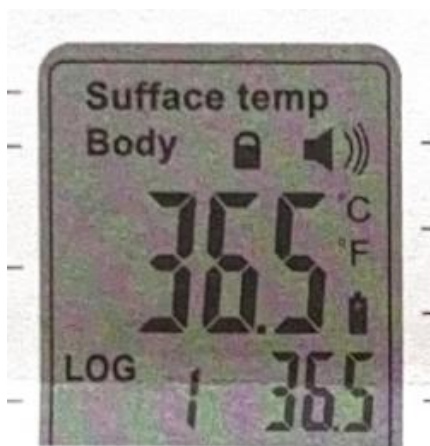

Upozorneni

1. Nedovolte detem mladším 12 let používat teplomer bez dozoru.
2. Nepoužívejte teplomer k jiným účelům, než ke kterým je určen.
3. Teplomer není vodotěsný. Neponorujte jej do vody ani jiných kapalin.
4. Neskladujte teplomer při velmi vysokých nebo velmi nízkých teplotách.
5. Při měření se zvukem držte teplomer ve vzdálenosti 2 až 5 cm od těla. Nehybejte s ním, dokud nezazní signál.
6. Pokud je teplomer poškozen, přestaňte jej používat. Neopravujte jej sami a nekladějte ostré předměty do senzoru ani jiných otvorů.
7. Teplomer není vhodný pro předčasné narození dětí ani pro děti do 6 měsíců věku.
8. Nezakryvejte senzor během měření.