

JOY TEST

Menopauza (FSH) test (moč)

Návod

Pro samotestování

REF FFS-102H

Čeština

Rychlá testovací kazeta pro kvalitativní detekci folikuly stimulujícího hormonu (FSH) ve vzorku lidské moči.

Pouze pro samotestování in vitro diagnostické použití.

URČENÉ POUŽITÍ

Menopauza (FSH) test (moč) je rychlý chromatografický imunotest pro kvalitativní detekci folikuly stimulujícího hormonu (FSH) v moči, který pomáhá při detekci menopauzy.

SHRNUTÍ A PRINCIP

Menopauza je trvalé zastavení menstruace, ale obvykle není vědecky diagnostikována dříve než jeden celý rok po ukončení menstruace ženy. Období vedoucí k menopauze a následujících 12 měsíců je známé jako perimenopauza. Mnoho žen během této doby pociťuje příznaky, jako jsou návaly horka, nepravidelné menstruační cykly, poruchy spánku, vaginální suchost, vypadávání vlasů, úzkost a změny nálad, ztráta krátkodobé paměti a únava. Nástup perimenopauzy je způsoben změnou hladin hormonů v ženském těle, které regulují menstruační cyklus. Jak tělo produkuje méně a méně estrogenu, zvyšuje svou produkci folikuly stimulujícího hormonu (FSH), který normálně reguluje vývoj vajíček samice.

Testování FSH proto může pomoci určit, zda je žena ve fázi perimenopauzy. Pokud žena ví, že je v perimenopauze, může podniknout vhodné kroky k udržení svého těla zdravého a vyhnout se zdravotním rizikům spojeným s menopauzou, mezi které patří osteoporóza, zvýšený krevní tlak a cholesterol a zvýšené riziko srdečních onemocnění.

Menopauza (FSH) test (moč) je rychlý jednorázový imunotest s laterálním průtokem pro kvalitativní detekci FSH v moči, který pomáhá při detekci menopauzy. Test využívá kombinaci protilátek včetně monoklonálních anti-FSH protilátek k selektivní detekci zvýšených hladin FSH.

ČINIDLO

Test obsahuje částice anti-FSH a anti-FSH nanesené na membránu.

OPATŘENÍ

Před provedením testu si prosím přečtete všechny informace v tomto příbalovém letáku.

- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vytištěné na zadní straně fóliového sáčku.
- Test by měl zůstat v uzavřeném sáčku až do použití.
- Skladujte v suchu při 2-30 °C (36-86 °F). **Chraňte před mrazem.**
- Nepoužívejte, pokud je sáček roztržený nebo poškozený.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pouze pro diagnostické použití *in vitro*.
- Neotevírejte fóliový sáček, dokud nejste připraveni zahájit test.
- Použijte test pouze jednou. Nerozebírejte a nedotýkejte se testovacího okénka testovací kazety.
- Použitý test by měl být zlikvidován v souladu s místními předpisy.

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Zabalené skladujte při pokojové teplotě nebo v chladničce (2-30 °C). Test je stabilní do data expirace vytištěného na zataveném obalu. Test musí zůstat v uzavřeném sáčku až do použití. **NEZMRZNUJTE.** Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKU

Vzorek moči musí být odebrán do čisté a suché nádoby. Upřednostňuje se první ranní moč, protože obecně obsahuje nejvyšší koncentraci FSH; lze však použít vzorky moči odebrané kdykoli během dne. Vzorky moči vykazující viditelné precipitáty by měly být odstředěny, filtrovány nebo ponechány usadit, aby se získal čistý vzorek pro testování.

ULOŽENÍ VZORKU

Vzorky moči mohou být skladovány při 2-8 °C po dobu až 48 hodin před testováním. Pro delší skladování mohou být vzorky zmrazeny a skladovány pod -20°C. Zmrazené vzorky je třeba před testováním rozmrazit a promíchat.

POSKYTNUTÉ MATERIÁLY

- Testovací zařízení

MATERIÁLY POTŘEBNÉ, ALE NEDODÁVANÉ

- Časovač

POKYNY


KDY ZAČÍT S TESTOVÁNÍM

- Pokud stále máte měsíční menstruaci, udělejte si první test během **prvního týdne vašeho cyklu (2.-7. den, přičemž 1. den je prvním dnem menstruace)**. Pokud je výsledek negativní, ale příznaky přetrvávají, opakujte druhý test o týden později.
- Pokud již nemáte pravidelnou menstruaci, udělejte si test kdykoli během měsíce a opakujte s druhým testem o týden později.

NÁVOD K POUŽITÍ

Nechte test, vzorek moči a/nebo kontroly dosáhnout pokojové teploty (15-30 °C) před testováním.

1. Určete den zahájení testování. (Viz výše uvedená část: „KDY ZAHÁJIT TESTOVÁNÍ“).
2. Před otevřením zahřejte sáček na pokojovou teplotu. Vyměňte testovací kazetu z uzavřeného obalu a ihned ji použijte do jedné hodiny.
3. Umístěte testovací kazetu na čistý a rovný povrch. Držte kapátko na vzorek visle a přeneste **3 kapky moči** do jamky na vzorek (S) testovací kazety, vyhněte se zachycení vzduchových bublin v jamce na vzorek a poté spusťte časovač. Viz obrázek níže.
4. Počkejte, až se objeví barevné čáry. **Výsledek čtete na 3 minuty.** Neinterpretujte výsledek po 10 minutách.

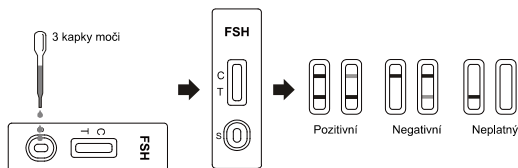

ČTENÍ VÝSLEDKŮ

(Viz obrázek)

POZITIVNÍ: Jsou viditelné dvě linie a linie v oblasti testovací linie (T) je stejná nebo tmavší než linie v oblasti kontrolní linie (C). Pozitivní výsledek znamená, že hladina FSH je vyšší než normální. Zaznamenejte výsledky a pro interpretaci výsledků se podívejte na níže uvedenou tabulku.

NEGATIVNÍ: Jsou viditelné dvě čáry, ale čára v oblasti testovací čáry (T) je světlejší než čára v oblasti kontrolní čáry (C), nebo v oblasti testovací čáry (T) není žádná čára. Negativní výsledek znamená, že hladina FSH není v tuto chvíli zvýšená. Zaznamenejte výsledky a pro interpretaci výsledků se podívejte na níže uvedenou tabulku.

NEPLATNÝ: Kontrolní čára se nezobrazuje. Nedostatečný objem vzorku nebo nesprávné procedurální techniky jsou nejpravděpodobnějšími důvody selhání kontrolní linky. Zkontrolujte postup a opakujte test s novým testem. Pokud problém přetrvává, okamžitě přestaňte testovací sadu používat a kontaktujte místního distributora.

VÝKLAD ZKOUŠKY

Pro ženy trpící premenopauzálními příznaky spolu s nepravidelným menstruačním cyklem:

1. test	2. test	Výklad
Pozitivní	Pozitivní	S největší pravděpodobností v perimenopauze . Diskutujte s lékařem o metodách a terapiích na podporu dobrého zdraví po menopauze. Antikoncepci okamžitě NEVYrušujte.
Pozitivní	Negativní	Může se jednat o raná stádia perimenopauzy. NEUSTÁVEJTE okamžitě antikoncepci.
NEBO		
Negativní	Pozitivní	S největší pravděpodobností se v tomto cyklu perimenopauza neprojeví. Pokud příznaky přetrvávají, zopakujte testování v následujícím měsíci nebo zvažte další možné příčiny příznaků.
Negativní	Negativní	

Pro ženy trpící symptomy menopauzy bez menstruačního cyklu za posledních 12 měsíců:

1. test	Výklad
Pozitivní	S největší pravděpodobností nastala menopauza. Test lze opakovat. Diskutujte s lékařem o metodách a terapiích na podporu dobrého zdraví po menopauze.

KONTROLNÍ POSTUP

Součástí testu je procedurální kontrola. Barevná linka objevující se v oblasti kontrolní linie (C) je interní procedurální kontrola. Potvrzuje dostatečný objem vzorku, adekvátní savost membrány a správnou techniku postupu.

OMEZENÍ

Existuje možnost, že tento test může poskytnout falešně pozitivní nebo falešně negativní výsledky. Před jakýmkoli lékařským rozhodnutím se poraďte se svým lékařem. Neplatné výsledky jsou pravděpodobně způsobeny nesprávným dodržováním pokynů. Přečtěte si pokyny a opakuje test s novým testem. Pokud problém přetrvává, okamžitě přestaňte testovací sadu používat a kontaktujte místního distributora.

UŽITEČNÉ INFORMACE

1. Otázka: Jak test funguje?

Odpověď: Jak vaše tělo stále a produkuje méně estrogenu, hladiny FSH se zvyšují, protože hormon se snaží stimulovat vaječníky k produkci zdravého vajíčka. Tento test měří FSH a může vám říci, zda vaše tělo produkuje nadbytek FSH v důsledku nízké hladiny estrogenu, což signalizuje, že vaše tělo je ve fázi perimenopauzy.

2. Otázka: Kdy mohu test použít?

Odpověď: Doporučujeme provést test pomocí první ranní moči, protože obsahuje nejvíce hormonů a poskytne nejpřesnější výsledek. Pokud stále máte menstruaci, doporučujeme testovat během prvního týdne vašeho cyklu (viz KDY ZAČÍT S TESTOVÁNÍM) a poté opakovat test o týden později.

3. Otázka: Jak poznám, že test fungoval?

Odpověď: Objevení se barevné čáry v oblasti kontrolní čáry (C) vám říká, že jste postupovali správně a že bylo absorbováno správné množství moči. Pokud nevidíte čáru v oblasti kontrolní čáry (C), měli byste si postup prohlédnout a opakovat s novým kazetovým testem. Test nelze znovu použít. Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte svého distributora.

4. Otázka: Dostal jsem pozitivní výsledek. Mohu přestat užívat antikoncepci?

Odpověď: Ne, tento test nemůže určit plodnost. Pokračujte v užívání antikoncepce, dokud váš lékař nepotvrdí stav menopauzy.

5. Otázka: Jak přesný je test?

Odpověď: Bylo provedeno klinické hodnocení srovnávající výsledky získané pomocí kazety Menopauza (FSH) test (moč) s jiným komerčně dostupným testem FSH v moči. Klinická studie zahrnovala 250 vzorků moči: oba testy identifikovaly 85 pozitivních a 165 negativních výsledků. Výsledky prokázaly 100,0% celkovou přesnost Menopauza (FSH) test (moč) ve srovnání s jiným testem FSH v moči.

6. Otázka: Jak citlivý je test?

Odpověď: Menopauza (FSH) test (moč) detekuje folikuly stimulující hormon (FSH) v moči v koncentracích 25 mIU /ml nebo vyšších. Přidání LH (1000 mIU/mL), hCG (100 mIU/mL) a TSH (1000 µIU/mL) až negativní (0 mIU/mL FSH) a pozitivní (25 mIU/mL FSH) vzorky nevykazovaly žádnou zkříženou reaktivitu.

7. Otázka: Ovlivňuje test alkohol nebo běžné léky?

Odpověď: Ne, ale pokud užíváte hormonální léky, měli byste se poradit se svým lékařem. Také nedávné užívání perorální antikoncepce, kojení, popř. těhotenství nebo jakýkoli příjem, který může změnit hormonální rovnováhu, může ovlivnit výsledky testu.

BIBLIOGRAFIE

1. Turkington CA. The Perimenopause Sourcebook. Contemporary Books, New York, NY. 1998.

2. Perry S, O'Hanlan K. Natural Menopause: The Complete Guide. Reading, MA, Addison-Wesley, 1997.

3. Stanford, J.L, Weiss NS, et al. Combined Estrogen and Progestin Hormone Replacement Therapy in Relation to Risk of Breast Cancer, J. Am. Med. Assoc. 1995; 274(2): 137-142.

4. Speroff I, Glass RH, Kase NG. Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility 5th Ed, Williams and Wilkins, Baltimore, MD. 1994; 588.

5. Jacobs DS, Demott DR, Grady HJ, Horvat RT, Huestis DW, Kasten BL, Laboratory Test Handbook 4th Ed, Lippincott Williams and Wilkins, Baltimore, MD. 1996

	Pouze pro diagnostické použití <i>in vitro</i>
	Skladujte při teplotě 2-30°C
	Nepoužívejte, pokud je obal poškozen
	Autorizovaný zástupce v EU
	Katalog #
	Testy na sadu
	Spotřebujte do
	Číslo šarže
	Výrobce
	Nepoužívejte znovu
	Přečtěte si návod k použití



Výrobce

Hangzhou Alltest Biotech Co., Ltd.
#550, Yinhai Street,
Hangzhou Economic & Technological Development Area
Hangzhou, 310018 P.R. China
Web: www.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn



CE 0123



EC REP

MedNet EC-REP GmbH, Borkstrasse 10, 48163 Muenster Germany

Distributor:
Czech Original Products s.r.o. / JOYMED.cz – IČ: 08595771
Koulova 6 Praha 6 160 00 Česká republika

Číslo kontroly:
Datum kontroly: 28.5.2024

JOY TEST

Menopauza (FSH) test (moč)

Návod

Pre samotestovanie

REF FFS-102H

Slovensky

Rýchlotestovacia kazeta na kvalitatívnu detekciu folikuly stimulujúceho hormónu (FSH) vo vzorke ľudského moču. Len na samotestovanie a diagnostické použitie in vitro.

URČENÉ POUŽITIE

Menopauza (FSH) test (moč) je rýchly chromatografický imunotest na kvalitatívnu detekciu folikuly stimulujúceho hormónu (FSH) v moči, ktorý pomáha pri detekcii menopauzy.

ZHRNUTIE A PRINCÍP

Menopauza je trvalé zastavenie menštruácie, ale zvyčajne sa vedecky nedиагностиuje skôr ako celý rok po ukončení menštruácie u ženy. Obdobie pred menopauzou a 12 mesiacov po nej sa nazýva perimenopauza. Mnoho žien počas tohto obdobia pociťuje príznaky vrátane návalov horúčavy, nepravidelného menštruačného cyklu, porúch spánku, vaginálnej suchosti, vypadávania vlasov, úzkosti a výkyvov nálad, krátkodobej straty pamäti a únavy. Nástup perimenopauzy je spôsobený zmenami hladín hormónov v ženskom tele, ktoré regulujú menštruačný cyklus. Keďže telo produkuje čoraz menej estrogénu, zvyšuje produkciu folikuly stimulujúceho hormónu (FSH), ktorý normálne reguluje vývoj vajíčok u žien.¹⁻³

Preto testovanie FSH môže pomôcť určiť, či sa žena nachádza v perimenopauze. Ak žena vie, že je v perimenopauze, môže podniknúť vhodné kroky na udržanie zdravia svojho tela a vyhnúť sa zdravotným rizikám spojeným s menopauzou, medzi ktoré patrí osteoporóza, zvýšený krvný tlak a cholesterol a zvýšené riziko srdcových ochorení.^{4,5}

Menopauza (FSH) test je rýchly, jednorukový imunotest s laterálnym prietokom na kvalitatívnu detekciu FSH v moči, ktorý pomáha pri detekcii menopauzy. Test využíva kombináciu protilátok vrátane monoklonálnych protilátok proti FSH na selektívnu detekciu zvýšených hladín FSH.

REAGENT

Test obsahuje častice anti-FSH a anti-FSH nanesené na membránu.

PREVENČIA

Pred vykonaním testu si prečítajte všetky informácie v tomto príbalovom letáku.

- Nepoužívajte po dátume expirácie vytičenom na zadnej strane fóliového vrečka.
- Test by mal zostať v uzavretom vrečku až do použitia.
- Skladujte na suchom mieste pri teplote 2 – 30 °C (36 – 86 °F). **Nezmrazujte.**
- Nepoužívajte, ak je vrečko roztrhnuté alebo poškodené.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Len na samotestovanie a diagnostické použitie *in vitro*
- Neotvárajte fóliové vrečko, kým nie ste pripravení začať s testom.
- Test použite iba raz. Nerozoberajte a nedotýkajte sa testovacieho okienka testovacej kazety.
- Použite test by sa mal zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi.

SKLADOVANIE A STABILITA

Skladujte v pôvodnom obale pri izbovej teplote alebo v chladničke (2 – 30 °C). Test je stabilný do dátumu expirácie uvedeného na uzavretom obale. Test musí zostať v uzavretom obale až do použitia. **NEZMRAZUJTE.** Nepoužívajte po dátume spotreby.

ODBER A PRÍPRAVA VZORIEK

Vzorka moču sa musí odobrať do čistej a suchej nádoby. Uprednostňuje sa prvá ranná vzorka moču, pretože zvyčajne obsahuje najvyššiu koncentráciu FSH; možno však použiť vzorky moču odobraté kedykoľvek počas dňa. Vzorky moču s viditeľnými zrazeninami by sa mali centrifugovať, filtrovať alebo nechať usadiť, aby sa získala číra vzorka na testovanie.

SKLADOVANIE VZORIEK

Vzorky moču sa môžu pred testovaním skladovať pri teplote 2 – 8 °C až 48 hodín. Pri dlhodobom skladovaní sa vzorky môžu zmraziť a skladovať pri teplote pod -20 °C. °C. Zmrazené vzorky by sa mali pred testovaním rozmraziť a premiešať.

POSKYTNUTÉ MATERIÁLY

- Testovacie zariadenie
- Návod
- Kvapkadlo
- **POTREBNÉ MATERIÁLY, KTORÉ NIE SÚ SÚČASŤOU SÚPRAVY**
- Časovač
- Nádoby na vzorky

POKYNY


KEDY ZAČAŤ S TESTOVANÍM

- Ak stále máte menštruáciu, urobte si prvý test počas **prvého týždňa cyklu (2. – 7. deň, pričom 1. deň je prvým dňom menštruácie)**. Ak je výsledok negatívny, ale príznaky pretrvávajú, zopakujte druhý test o týždeň neskôr.
- Ak už nemáte pravidelnú menštruáciu, urobte si test kedykoľvek počas mesiaca a druhý test zopakujte o týždeň neskôr.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred testovaním nechajte test, vzorku moču a/alebo kontrolu dosiahnuť izbovú teplotu (15 – 30 °C).

1. Určte si deň, kedy začať s testovaním. (Pozri vyššie uvedenú časť: „KEDY ZAČAŤ S TESTOVANÍM“).
2. Pred otvorením nechajte vrečko zohriať na izbovú teplotu. Vyberte testovaciu kazetu zo zataveného vrečka a ihneď ju použite do jednej hodiny.
3. Umiestnite testovaciu kazetu na čistý a rovný povrch. Držte kvapkadlo na vzorku vertikálne a preneste **3 kvapky moču** do jamky na vzorku (S) testovacej kazety, zabráňte zachyteniu vzduchových bublín v jamke na vzorku a potom pusťte časovač. Pozri obrázok nižšie.
4. Počkajte, kým sa objaví farebná čiara (čiary). **Výsledok odčítajte za 3 minúty**. Výsledok neinterpretujte po 10 minútach.

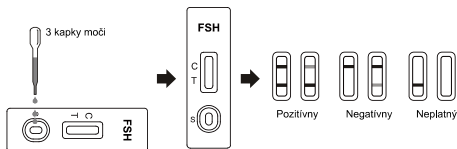

ČÍTANIE VÝSLEDKOV

(Pozrite si ilustráciu)

POZITÍVNY: Viditeľné sú dve farebné čiary a čiara v testovacej oblasti (T) je rovnaká alebo tmavšia ako čiara v kontrolnej oblasti (C). Pozitívny výsledok znamená, že hladina FSH je vyššia ako normálna hodnota. Zaznamenajte si výsledky a na ich interpretáciu si pozrite tabuľku nižšie.

NEGATÍVNY: Viditeľné sú dve farebné čiary, ale čiara v testovacej oblasti (T) je svetlejšia ako čiara v kontrolnej oblasti (C) alebo v testovacej oblasti (T) nie je žiadna čiara. Negatívny výsledok znamená, že hladina FSH nie je v tomto čase zvýšená. Zaznamenajte si výsledky a na ich interpretáciu si pozrite tabuľku nižšie.

NEPLATNÝ: Kontrolná čiarka sa neobjavuje. Najpravdepodobnejšími príčinami zlyhania kontrolnej čiarky sú nedostatočný objem vzorky alebo nesprávne postupy. Skontrolujte postup a zopakujte test s novým testom. Ak problém pretrváva, okamžite prestaňte testovaciu súpravu používať a kontaktujte miestneho distribútora.

INTERPRETÁCIA TESTU

Pre ženy, ktoré majú premenopauzálne príznaky spolu s nepravidelným menštruačným cyklom:

1. test	2. test	Interpretácia
Pozitívny	Pozitívny	S najväčšou pravdepodobnosťou v perimenopauze. Prediskutujte s lekárom metódy a terapie na podporu dobrého zdravia po menopauze. NEPRERUŠUJTE okamžite antikoncepciu.
Pozitívny	Negatívny	
ALEBO		Môže byť v počiatočných štádiách perimenopauzy. NEPRERUŠUJTE okamžite antikoncepciu.
Negatívny	Pozitívny	
Negatívny	Negatívny	S najväčšou pravdepodobnosťou sa v tomto cykle neprejaví perimenopauza. Ak príznaky

		pretrvávajú, zopakujte testovanie v nasledujúcom mesiaci alebo skontrolujte iné možné príčiny príznakov.
--	--	--

Pre ženy, ktoré majú menopauzálné príznaky bez menštruačného cyklu počas posledných 12 mesiacov:

1. test	Interpretácia
Positívny	S najväčšou pravdepodobnosťou nastala menopauza. Test sa môže zopakovať. Prediskutujte s lekárom metódy a terapie na podporu dobrého zdravia po menopauze.

KONTROLNÝ POSTUP

Súčasťou testu je aj kontrola postupu. Farebná čiara objavujúca sa v kontrolnej oblasti (C) je interná kontrola postupu. Potvrďuje dostatočný objem vzorky, primerané nasiakanie membránou a správnu techniku postupu.

OBMEDZENIA

Existuje možnosť, že tento test môže viesť k falošne pozitívnym alebo falošne negatívnym výsledkom. Pred akýmkoľvek lekársnym rozhodnutím sa poraďte so svojim lekárom. Neplatné výsledky sú s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobené nedodržaním pokynov. Prečítajte si pokyny a test zopakujte s novým testom. Ak problém pretrváva, okamžite prestaňte testovaciu súpravu používať a kontaktujte miestneho distribútora.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

1. Otázka: Ako test funguje?

A: Ako vaše telo starne a produkuje menej estrogénu, hladiny FSH sa zvyšujú, pretože hormón sa snaží stimulovať vaječníky k produkcii zdravého vajíčka. Tento test meria FSH a môže vám povedať, či vaše telo produkuje nadmerné množstvo FSH v dôsledku nízkych hladín estrogénu, čo signalizuje, že sa vaše telo nachádza v perimenopauze .

2. Otázka: Kedy môžem použiť test?

A: Odporúčame vykonať test s použitím prvého ranného moču, pretože obsahuje najviac hormónov a poskytne najpresnejší výsledok. Ak stále menštruujete, odporúčame testovať počas prvého týždňa cyklu (pozri KEDY ZAČAŤ S TESTOVANÍM) a potom testovať znova o týždeň neskôr.

3. Otázka: Ako zistím, že test fungoval?

A: Objavenie farebnej čiary v kontrolnej oblasti (C) signalizuje, že ste správne dodržali postup testovania a absorbovalo sa správne množstvo moču. Ak v kontrolnej oblasti (C) čiaru nevidíte, mali by ste si postup skontrolovať a zopakovať s novým kazetovým testom. Test nie je opakovane použiteľný. Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte svojho distribútora.

4. Otázka: Dostal(a) som pozitívny výsledok. Môžem prestať používať antikoncepciu?

A: Nie, tento test nedokáže určiť plodnosť. Pokračujte v používaní antikoncepcie, kým vám lekár nepotvrdí stav menopauzy.

5. Otázka: Aká presnosť má tento test?

A: Bolo vykonané klinické hodnotenie porovnávajúce výsledky získané pomocou Menopauza (FSH) test s iným komerčne dostupným testom FSH v moči. Klinická štúdia zahŕňala 250 vzoriek moču: oba testy identifikovali 85 pozitívnych a 165 negatívnych výsledkov. Výsledky preukázali 100,0 % celkovú presnosť Menopauza (FSH) test v porovnaní s iným testom FSH v moči.

6. Otázka: Aká citlivosť je testu?

A: Menopauza (FSH) test detekuje folikuly stimulujúci hormón (FSH) v moči v koncentráciách 25 mIU /ml alebo vyšších. Pridanie LH (1 000 mIU /ml), hCG (100 mIU /ml) a TSH (1 000 µIU/ml) s negatívnymi (0 mIU /ml FSH) a pozitívnymi (25 mIU /ml FSH) vzorkami nepreukázala žiadnu skriženú reaktivitu.

7. Otázka: Oplývňuje test alkohol alebo bežné lieky?

A: Nie, ale ak užívate nejaké hormonálne lieky, mali by ste sa poradiť so svojim lekárom. Výsledky testu môže ovplyvniť aj nedávne užívanie perorálnej antikoncepcie, dojenie alebo tehotenstvo alebo akýkoľvek príjem, ktorý môže zmeniť hormonálnu rovnováhu.

BIBLIOGRAFIA

1. Turkington CA. The Perimenopause Sourcebook. Contemporary Books, New York, NY. 1998.
2. Perry S, O'Hanlan K. Natural Menopause: The Complete Guide. Reading, MA, Addison-Wesley, 1997.
3. Stanford, JL, Weiss NS, et al. Combined Estrogen and Progestin Hormone Replacement Therapy in Relation to Risk of Breast Cancer, J. Am. Med. Assoc. 1995; 274(2): 137-142.
4. Speroff L, Glass RH, Kase NG, Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility 5th Ed, Williams and Wilkins, Baltimore, MD. 1994; 588.
5. Jacobs DS, Demott DR, Grady HJ, Horvat RT, Huestis DW, Kasten BL, Laboratory Test Handbook 4th Ed, Lippincott Williams and Wilkins, Baltimore, MD. 1996

	Len na diagnostické použitie <i>in vitro</i>
	Skladujte pri teplote 2 – 30 °C
	Nepoužívajte, ak je obal poškodený
	Autorizovaný zástupca v EÚ
	Katalógové číslo
	Testy na súpravu
	Spotrebujte do
	Číslo šarže
	Výrobca
	Nepoužívajte opakovane
	Prečítajte si návod na použitie

Hangzhou Alltest Biotech Co., Ltd.

#550, Yinhai Street,
Hangzhou Economic & Technological Development Area
Hangzhou, 310018 P.R. China
Web: www.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn



Výrobca

CE 0123

EC REP

MedNet EC-REP GmbH Borkstrasse 10, 48163 Muenster, Germany

Distribútor:
Slovak Original Products s.r.o. – JOYMED.sk – IČO: 08595771
Koulova 6, Praha 6, 160 00 – Česká republika

Číslo revízie:

Dátum revízie: 28.5.2025